

常用型号规格

型号规格	导管F值	导管鞘有效长度(cm)	导丝直径(in)
K01-Z10511A	5F	11	0.021
K01-Z10611A	6F	11	0.021
K01-Z10511L	5F	11	0.021
K01-Z10611L	6F	11	0.021
K01-X10411M	4F	11	0.035
K01-X10511M	5F	11	0.035
K01-X10611M	6F	11	0.035
K01-X10711M	7F	11	0.035
K01-X10811M	8F	11	0.035
K01-X10911M	9F	11	0.035
K01-X11011M	10F	11	0.035
K01-X11111M	11F	11	0.035

*规格详见注册证

河北康誉医疗器械有限公司

网 址: <http://www.courymed.com>


联系方式: 0311-88882200/400-887-7986

地 址: 中国(河北)自由贸易试验区正定片区河北正定高新技术产业开发区南区崇因路15号

导管鞘组


冀械注准20232030458

适用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。

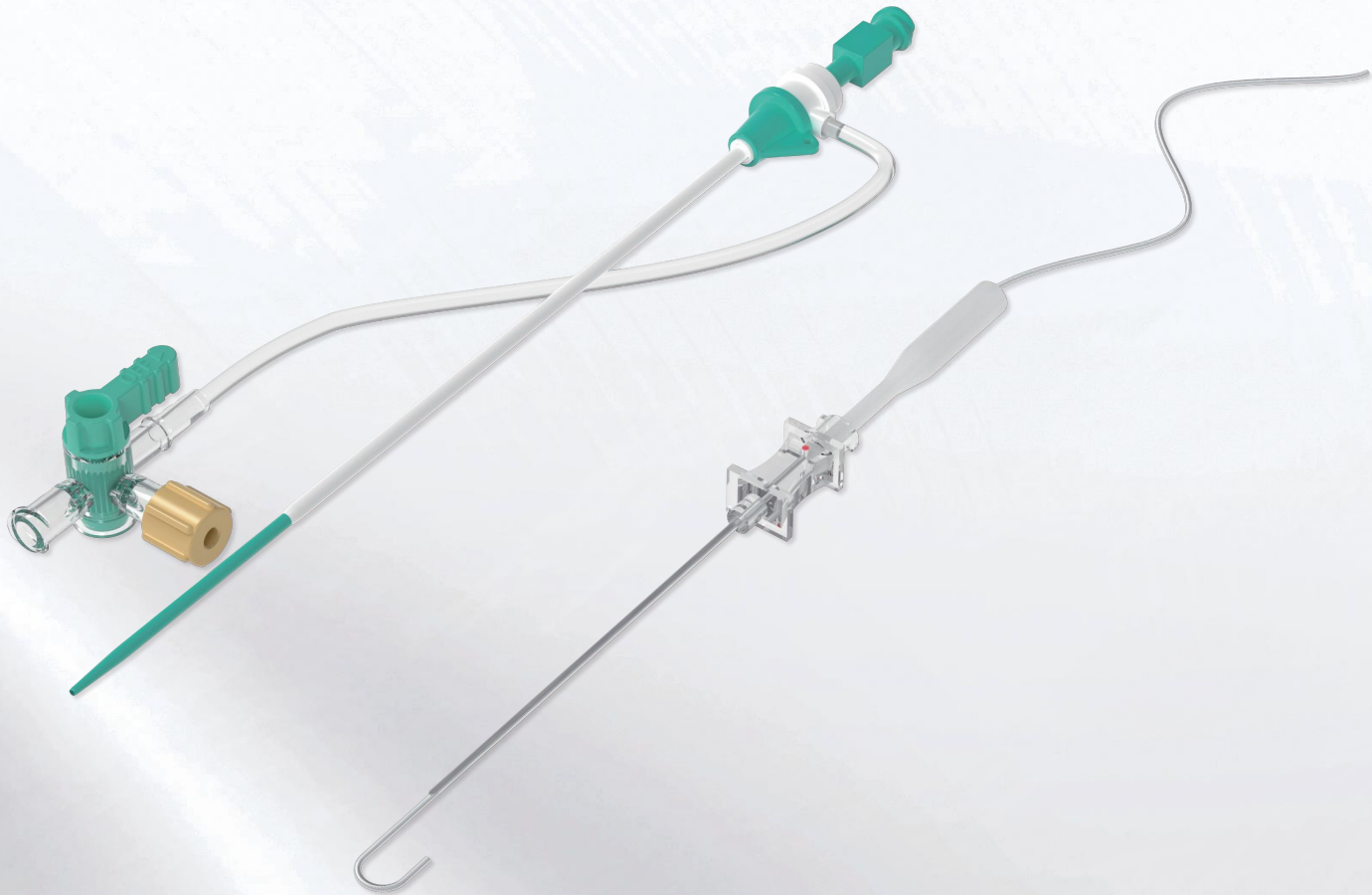


产品介绍

满足顾客需求,持续创新改进

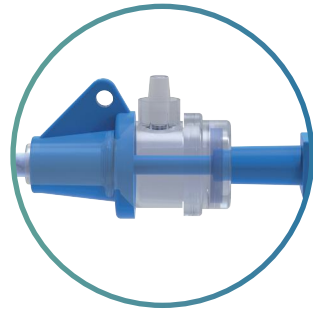

卡扣式结构

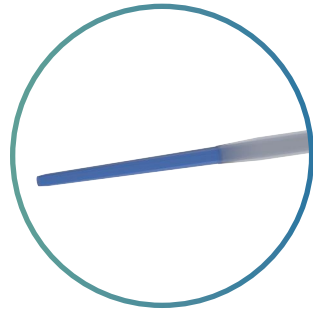

扩张器管与鞘管楔形过渡

采用卡扣式

让扩张器和鞘管可靠的嵌合，
有效的防止扩张器脱落。



扩张器管与鞘管楔形过渡

在使用时可获得鞘管与扩张器
“一体化”的操作感觉。

独特的止血阀设计

利于扩张器的插入，方便导丝导管导入，
具有良好的阻血性。

产品的技术特点及设计优势

1 良好的阻血性

- 独特的切缝设计，阻断手术过程中的血液泄漏。

2 易操作性

- 通过优秀的设计使得扩张器管及鞘管产生良好的过渡，易于将鞘管送入血管。

3 可固定性

- 鞘支架可围绕鞘外壳旋转，便于固定鞘外壳。

4 可视性

- 鞘管及扩张器管内含有不透射线的材质，易于实时检测到其插入位置及状态。

5 多种可选型号规格

- 根据病变位置不同、血管粗细不同可选择不同直径及长度的鞘管。提供4F-11F多种选择，满足临床的不同需求。